

FI Käyttöohje

Käyttötarkoitus: Syvävetokalvot hammaslääketieteellisessä ja leukaikirurgisessa hoiossa käytettävien koiden ja kiskojen valmistukseen

Käyttöaihe: Ainoastaan tilapäisten hammas-tuukien, tukikiskojen ja pysyvien hammas-tuukien valmistukseen. Käyttöohjeet löytyvät osoitteesta www.scheu-dental.com/pressure-moulding-material.

Vasta-aihe: Herkillä ihmisillä CA-tukifolio tuotteen ainesosien (PETG) aiheuttamat allergiset reaktiot eivät ole pois suljettuja. Käyttöalueesta poikkeavaa käyttöä ei ole arvioitu.

Säilytys: Säilytettävä 5–35 °C:n lämpötilassa. Suojattava auringonvalolta. Säilytettävä kuivassa paikassa.

Huomautus: Tuotetta saa käyttää vain pätevä ammattihenkilöstö, ja tuote on käytettävä 15 minuutin kuluessa avaamisesta. Avaa vain vahingoittumattomat ja avaamattomat suojapus-sit. Vain kertakäyttöön. Tuotteen käy-
tön yhteydessä ilmenneistä vakavista vaaratilanteista on ilmoitettava välittömästi valmistajalle ja toimival-taiselle viranomaiselle!

Turvallisuusoehje: Käyttö on hoidon suorittavan lääkärin vastuulla. Jos materiaalisia on halkeaa-mia/murtumia/kuplia, kiskoa ei saa käyttää niele-misen ja aspiration vaaran vuoksi. Jos CA-tuki-folio tuotteita käytetään 3D-tulostettujen mallien kanssa, on käytettävä perforaamattomia suojakal-voa (ISOFOLAN®). Suojakalvo on poistettava syvä-vedon jälkeen. Tuotteet eivät saa joutua koske-tuksiin alkoholipitoisten / orgaanisten liuotimien, kuuman veden tai höyrystiikun kanssa.

HU Használati útmutató

Rendeltetés: Mélyhúzó fóliák készülékek és sinek előállításához fogorvosi és fogszabályozási kezeléshez

Javallat: Kizárólag retainerek, retenciós sín és fix retainerek gyártására alkalmas. Alkalmazási útmutató a www.scheu-dental.com/pressure-moulding-material honlapon.

Ellenjavallat: Az allergiás reakciók a CA retenciós fólia (PETG) összetevőivel szemben nem zárhatók ki az arra érzékeny személyek esetében. Az alkalmazási területen kívüli bármilyen felhasználás nem javallott.

Tárolás: 5 °C és 35 °C között tárolandó. Napfénytől védett, száraz, hűvös helyen tárolandó.

Megjegyzés: Csak szakképzett személyzet használhatja a felnyitástól számított 15 percen belül. Csak sértetlen, lezárt barrier tasakokat nyisszon fel. Egyszeri használatra. A termék használatával kapcsolatos súlyos rendkívüli eseményeket azon-lal jelenten kell a gyártónak és az illetékes ható-ságnak!

Biztonsági megjegyzés: A termék használat a kezelőorvos felölössége. A sint nem szabad hasz-nálni, ha az anyag repedezett/töredezett/hólya-gos, mert lenyelés vagy aspiráció veszélye áll fent. A CA retenciós fólia 3D-nyomtatott model-lekkel való használatokor nem perforált védőfóliát (ISOFOLAN®) kell használni. A mélyhúzási eljárás után távolítsa el a védőfóliát. Ne hagyja, hogy a termék alkoholtartalmú/szerves oldószerekkel, forró vízzel vagy gőzsugárral érintkezzenek.

BG Инструкция за употреба

Предназначение: Термоформовъчни фолия за изработка на апарати и шини за стоматологично и ортодонтско лечение

Показание: Изключително подходящи за изработка на ретайнери, ретенционни шини и фиксирани ретайнери. Указания за приложени-
е вж. на www.scheu-dental.com/pressure-moulding-material.

Противопоказание: Алергични реакции към съставки на СА ретенционни фолио (PETG) не могат да бъдат изключени при сенсibili-лизирани лица. Всяко използване извън областта на прило-жение е непоказано.

Съхранение: Съхранявайте при 5 до 35 °C. Пазете от слънчева светлина. Съхранявайте на сухо място.

Указание: Да се използва само от квалифи-циран специализиран персонал в рамките на 15 минути след отварянето. Отварян-
ето само неподредени, затворени барьери-ни плъкове. За еднократна употреба. Сериоз-ни инциденти във връзка с използването на изделията следва да се докладват незабав-но на производителя и компетентния орган!

Указание за безопасност: Използването под-лежи на отговорността на лекуващия лекар. При пукнатини/счупления/образуване на мехурчета в материала шината не трябва да се използва. Опасност от поглъщане или аспиране. При използване на СА ретен-ционното фолио с 3D принтирани модели трябва да се използва неперфорирано защитно фолио (ISOFOLAN®). След термоф-ормовъчния процес отстранете защитното фолио. Не допускайте контакт на изделията със съдържащи алкохол/орга-нични разтво-рители, гореща вода или пароструйки.

PL Instrukcja użytkowania

Zastosowanie: Folie do termoformowania, przeznaczone do wytwarzania aparatów i szyn do leczenia stomatologicznego i ortodontycznego

Wskazania: Wyrób jest przeznaczony wyłącznie do wytwarzania nakładek ortodontycznych, szyn retencyjnych i retainerów stałych. Informacje dotyczące zastosowania są dostępne pod adresem www.scheu-dental.com/pressure-moulding-material.

Przeciwwskazania: Nie można wykluczyć reakcji alergicznych na składniki Folii retencyjnej CA (PETG) u osób uczulonych. Jakiegokolwiek użycie wykraczające poza obszar zastosowania jest niewskazane.

Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 5 do 35°C. Trzymać z dala od światła słonecznego. Chronić przed wilgocią.

Wskazówka: Wyrób może być stosowany wyłącz-nie przez wykwalifikowany personel specjalistycz-ny w ciągu 15 minut po otwarciu opakowania. Otwierac wyłączenie nieuszkodzone, zamknięte woreczki barierowe. Wyrób jednorazowego użyt-ku. Wszelkie powazne incydenty związane z wy-robem należy niezwłocznie zgłaszać producentowi i właściwemu organowi!

Informacja dotycząca bezpieczeństwa: Wyrób sto-sowany jest na odpowiedzialność lekarza prowadzą-cego. W przypadku obecności pęknięć/złamań/pe-czerzyków powietrza w materiale, nie należy używać szyny, ponieważ stwarza to ryzyko pokłnięcia lub aspiracji. W przypadku stosowania Folii retencyjnej CA z modelami wykonanymi techniką druku 3D, należy użyć nieperforowanej folii ochronnej (ISOFOLAN®). Po zakończeniu procesu termoformowania należy usu-nąć folię ochronną. Nie dopuszczac do kontaktu pro-duktów z rozpuszczalnikami alkoholowymi/organicz-nymi, gorącą wodą lub wytwornicami pary.

CZ Návod k použití

Určeny účel použití: Tepelně tvarovatelné fólie k výrobě aparátů a dlah pro zubařské ošetření a čelistní ortopedii

Indikace: Vhodné výhradně k výrobě rovnátek, retenčních dlah a trvalých rovnátek. Pokyny k použití najdete na adrese www.scheu-dental.com/pressure-moulding-material.

Kontraindikace: U senzibilizovaných osob nelze vyloučit alergické reakce na složky produktu retenční fólie CA (PETG). Jakákoli aplikace mimo oblast použití není indi-kována.

Skladování: Skladujte při teplotě 5 až 35 °C. Chraňte před slunečním zářením. Uchovávejte na suchém místě.

Upozornění: Produkt smí používat pouze kvalifi-kovaný personál do 15 minut po otevření. Oteví-rajte pouze nepoškozené, uzavřené bariérové sáčky. K jednorázovému použití. Závažné nežá-doucí události v souvislosti s použitím produktu je třeba neprodlelně nahlásit výrobci a příslušnému orgánu!

Bezpečnostní pokyny: Za použití je odpovědný lékař. Dlahu se nesmí použít, pokud se v materiálu objeví trhliny/praskliny/bublinky, v takovém pří-padě hrozí nebezpečí poknutí nebo vdechnutí. V případě použití produktu retenční fólie CA s modely vytýštěnými na 3D tiskárně se musí použít neperforovaná ochranná fólie (ISOFOLAN®). Po procesu tepelného tvarování ochrannou fólii odstraňte. Produkty nesmí přijít do styku s roz-pouštědly obsahujícími alkohol / organickými roz-pouštědly, horkou vodou nebo parními čistícími.

HR Használati útmutató

Namjena: Termoformirajuće folije za izradu naprava i udlaga za stomatološko i ortodontsko liječenje

Indikacije: Isključivo za izradu retainera, retencij-skih udlaga i dugotrajnih retainera. Upute za primjenu mogu se preuzeti sa stranice www.scheu-dental.com/pressure-moulding-material.

Kontraindikacije: Alergijske reakcije na sastojke CA retencijske folije (PETG) ne mogu se isključiti kod osjetljivih osoba. Bilo kakva primjena izvan područja uporabe nije indicirana.

Čuvanje: Čuvati na temperaturi između 5 i 35 °C. Zaštititi od sunčeva svjetla. Čuvati na suhom mje-stu.

Napomena: Proizvod smije upotrebljavati samo kvalificirano stručno osoblje u roku od 15 minuta od otvaranja. Otvarajte samo neoštećene, zatvo-rene zaštitne vrećice. Za jednokratnu uporabu. Štetni događaji u vezi s uporabom proizvoda tre-baju se odmah prijaviti proizvođaču i nadležnom tijelu!

Sigurnosne napomene: Za uporabu je odgovor-an stomatolog koji provodi liječenje. Udlaga se ne smije upotrebljavati ako postoje pukotine/ lomovi/mjehurići u materijalu, opasnost od guše-nja ili udisanja. Kada upotrebljavate CA retencij-sku foliju s 3D ispisanim modelima, morate upo-trebljavati neperforiranu zaštitnu foliju (ISOFOLAN®). Nakon postupka dubokog izvlačenja folije uklonite zaštitnu foliju. Nemojte dovoditi proizvode u dodir s otapalima koja sadrže alkohol / organskim otapalima, vrućom vodom ili mlaz-o-vima pare.

GR Οδηγίες χρήσης

Προβλεπόμενη χρήση: Φύλλα νάρθηκα για τη δημιουργία μηχανισμών και νάρθηκων για την οδοντιατρική και ορθοδοντική θεραπεία


Ένδειξη: Κατάλληλα αποκλειστικά για την κατασκευή ορθοδοντικών μηχανισμών, νάρθη-κων βρυσμού και μόνιμων ορθοδοντικών μηχανισμών. Υποδείξεις χρήσης στο www.scheu-dental.com/pressure-moulding-material.

Αντένδειξη: Δεν αποκλείονται αλλεργικές αντιδράσεις σε συστατικά του φύλλου συγκράτησης CA (PETG) σε ευαίσθητοποιημέ-να άτομα. Οποιαδήποτε χρήση πέραν του πεδίου χρήσης δεν ενδείκνυται.

Αποθήκευση: Να αποθηκεύεται σε θερμοκρα-σίες από 5 °C έως 35 °C. Να προστατεύεται από το ηλιακό φως. Να φυλάσσεται στεγνό.

Υπόδειξη: Να χρησιμοποιείται μόνο από εξειδί-κευμένο προσωπικό εντός 15 λεπτών από το άνοιγμα. Να ανοίγετε μόνο σφραγισμένες συσκευασίες στείρου φραγμού οι οποίες δεν φέρουν ζημιές. Μιας χρήσης. Σοβαρά συμβά-ντα τα οποία σχετίζονται με τη χρήση του προϊόντος πρέπει να αναφέρονται αμέσως στον κατασκευαστή και την αρμόδια αρχή!

Υπόδειξη ασφαλείας: Υπεύθυνος για τη χρήση είναι ο ιατρός. Η χρήση του νάρθηκα απαγο-ρεύεται σε περιπτώσεις ρωγμών/θραύσεων/ σχηματισμού φυσαλίδων στο υλικό, κινδύνος κατάπληξης ή αναρρόφησης. Κατά τη χρήση του φύλλου συγκράτησης CA με μοντέλα τα οποία έχουν δημιουργηθεί με τριδιάστατη εκτύπωση, πρέπει να χρησιμοποιείται μια μη διάτρητη προστατευτική μεμβράνη (ISOFOLAN®). Μετά τη διαδικασία του φορμα-ρίσματος, αφαιρέστε την προστατευτική με-μβράνη. Μην φέρνετε τα προϊόντα σε επαφή με αλκοολούχα/οργανικά διαλυτικά μέσα, καθώς το νερό ή όσμες ατμού.

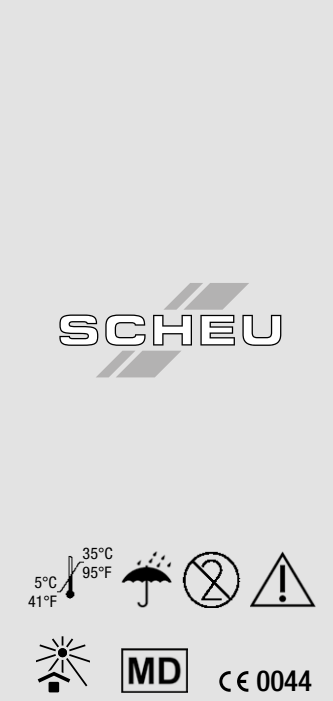

DE Gebrauchsanweisung

Zweckbestimmung: Tiefziehfolien zur Herstel-lung von Apparaturen und Schienen für die zah-närztliche und kieferorthopädische Behandlung

Indikation: Ausschließlich geeignet zur Herstel-lung von Retainern, Retentionsschienen und Langzeitretainern. Anwendungsanweise unter www.scheu-dental.com/tiefziehfolien.

Kontraindikation: Allergische Reaktionen gegen Bestandteile von CA Retentionsfolie (PETG) sind bei sensibilisierten Personen nicht auszuschlie-ßen.

Jede Anwendung außerhalb des Einsatzgebiets ist nicht indiziert.

Lagerung: Bei 5°C bis 35°C lagern. Vor Sonnen-licht schützen. Trocken aufbewahren.

Hinweis: Nur durch qualifiziertes Fachpersonal innerhalb von 15 Minuten nach dem Öffnen zu verwenden. Öffnen Sie nur unbeschädigte, ver-schlossene Barrierebeutel. Zur Einmalverwen-dung. Schwerwiegende Vorfälle im Zusammen-hang mit der Verwendung des Produktes sind unverzüglich dem Hersteller und der zuständi-gen Behörde zu melden!

Sicherheitshinweise: Die Verwendung unterliegt der Verantwortung des Behandlers. Schiene darf bei Rissen/Brüchen/Bläschenbildung im Material nicht verwendet werden, Gefahr des Verschlus-sens oder Aspiration. Bei Verwendung der CA Retentionsfolie mit 3D-gedruckten Modellen muss eine nicht perforierte Schutzfolie (ISOFO-LAN®) verwendet werden. Schutzfolie nach dem Tiefziehvorgang entfernen. Produkte nicht mit alkoholhaltigen/organischen Lösungsmitteln, hei-ßem Wasser oder Dampfstrahlern in Kontakt brin-gen.

CA® Retentions-folie pd

Tiefziehfolien
thermoplastic foils
plaques de thermoformage
fogli termoformanti
planchas de termomoldeo
películas de termoformagem
gilliojo tempimo plêvelês
dyptrekkingsfolier
filme de termoformare
hlbkoťažné fólie
basinçlı kalıplama folyolanı
djupdragningsfilm
dybtraeksfolier
syvävetokalvot
термоформовъчни фолия
termoplastické fólie
φύλλα νάρθηκα
mélyhúzó fóliák
folie do termoformowania
termoformirajuće folije
Termoformēšanas plēves



EN Instructions for use

Intended purpose: Thermoplastic foils for the manufacture of appliances and splints for dental and orthodontic treatment

Indication: Suitable only for the fabrication of retainers, retention splints and long-term retainers. Instructions for use can be found at www.scheu-dental.com/pressure-moulding-material.

Contraindication: Allergic reactions to components of CA Retention Foil (PETG) cannot be ruled out in sensitised people.

Any use not stated above is contraindicated.

Storage: Store at 5°C to 35°C. Protect from sunlight. Keep dry.

Important: Must only be used by qualified personnel and within 15 minutes after opening. Only open the barrier bag if it is undamaged and still sealed. For single use. Any serious incident involving the product must be reported to the manufacturer and the competent authority immediately.

Safety information: The practitioner is responsible for correct use. The splint must not be used if the material is cracked/broken/contains bubbles; there is a risk of swallowing or aspiration. When using CA Retention Foil with 3D-printed models, a non-perforated protective foil (ISOFOLAN®) must be used. Remove the protective foil after the thermoforming process. Do not bring the products into contact with alcohol-based/organic solvents, hot water or steam jets.

NO Bruksanvisning

Tiltentkt bruk: Dyptrékkingsfolier til fremstilling av apparatur og skinner til tann- og kjeveortopedisk behandling

Indikasjon: Utelukkende beregnet til produksjon av retainerne, retensjonsskinner og langtidstreainere. Bruksanvisning på www.scheu-dental.com/pressure-moulding-material.

Kontraindikasjon: Allergiske reaksjoner på komponenter i CA-retensjonsfolien (PETG) kan ikke utelukkes hos sensibliserte personer. All bruk utenfor bruksområdet er ikke indikert.

Oppbevaring: Oppbevares ved 5 til 35 °C. Beskyttes mot sollys. Oppbevares tørt.

Merknad: Skal kun brukes av kvalifisert personell innen 15 minutter etter åpning. Bare åpne uskadde, forseglede barriereposer. Kun til engangsbruk. Alvorlige hendelser i forbindelse med bruk av produktet må umiddelbart rapporteres til produsent og ansvarlig tilsynsmyndighet!

Sikkerhetsanvisninger: Bruken skjer på brukrens eget ansvar. Skinnen må ikke brukes hvis det er sprekker/brudd/bobler i materialet, fare for sveiging eller aspirasjon. Ved bruk av CA-retensjonsfolien med 3D-printede modeller må det brukes en ikke-perforert beskyttelsesfolie (ISO-FOLAN®). Fjern beskyttelsesfolien etter dyptrékkingsprosessen. Produktene må ikke komme i kontakt med alkoholholdige/organiske løsemidler, varmt vann eller damprenere.

FR Notice d'utilisation

Destination: Plaques de thermoformage pour la fabrication d'appareils et de gouttières destinés aux traitements dentaires et orthodontiques

Indication: Pour la fabrication uniquement de contentions, de gouttières de contention ou de contentions longue durée. Vous trouverez des conseils d'utilisation sur le site www.scheu-dental.com/pressure-moulding-material.

Contre-indication : Des réactions allergiques aux composants des plaques de contention (PETG) ne peuvent être exclues chez les personnes sensibilisées. Toute utilisation en dehors du domaine d'application est considérée comme contre-indiquée.

Stockag : Stocker entre 5 °C et 35 °C. Conserver à l'abri de la lumière du soleil. Craint l'humidité.

Note: À utiliser uniquement par du personnel spécialisé qualifié dans un délai de 15 minutes après ouverture. Avant d'ouvrir le sachet barrière, vérifiez qu'il est intact et parfaitement fermé. À usage unique. Tout incident grave lié à l'utilisation du dispositif doit être immédiatement notifié au fabricant et aux autorités compétentes.

Consigne de sécurité: La personne chargée du traitement est responsable de l'utilisation du dispositif. Ne pas utiliser une gouttière présentant des fissures, des cassures ou des bulles d'air : risque d'ingestion ou d'inhalation. L'emploi de la plaque de contention CA avec des modèles imprimés en 3D implique l'utilisation d'une feuille d'isolation perforée (ISOFOLAN®). Retirer la feuille d'isolation après le processus de thermoformage. Ne pas mettre les dispositifs en contact avec des solvants contenant de l'alcool, des solvants organiques, de l'eau brûlante ou des jets de vapeur.

RO Instrucțiuni de utilizare

Scop: Filme de termoformare pentru confecționarea aparatelor și șinelor pentru tratament stomatologic și ortodontic

Indicație: Adecvat exclusiv pentru confecționarea de retainere, șine de retenție și retainere de lungă durată. Indicații de utilizare găsiți la adresa www.scheu-dental.com/pressure-moulding-material.

Kontraindicații: Reacțiile alergice la componentele filmului de retenție CA (PETG) nu pot fi excluse la persoanele sensibilizate. Orice utilizare în afara domeniului de utilizare se consideră contraindicație.

Depozitare: Depozitați la temperaturi cuprinse între 5 și 35 °C. A se proteja împotriva luminii solare. A se păstra în locuri uscate.

Indicație: Se va utiliza numai de către personal de specialitate calificat, în decurs de 15 minute de la deschidere. Deschideți numai ambalajele nedeteriorate și sigilate. A nu se reutiliza. Incidentele grave în legătură cu utilizarea produsului trebuie comunicate neîntârziat producătorului și autorității competente.

Indicație de siguranță: Utilizarea este responsabilitea practionarului. Dacă materialul prezintă fisuri/spărturi/formare de mici bule, utilizarea și/sau este interzisă – pericol de ingerare sau aspirare. La utilizarea filmului de retenție CA cu modele printate 3D se va utiliza o folie de protecție neperforată (ISOFOLAN®). Folia de protecție se îndepărtează după operația de ambutisare. Nu aduceți produsele în contact cu solvenți cu conținut de alcool/organici, apă fierbinte sau vapori sub presiune.

IT Istruzioni per l'uso

Destinazione d'uso: Fogli termofomanti per la realizzazione di apparecchi e splint per il trattamento odontoiatrico e ortodontico

Indicazione: Prodotto adatto esclusivamente per la realizzazione di retainer, splint di ritenzione e retainer a lungo termine. Istruzioni per l'uso disponibili all'indirizzo www.scheu-dental.com/pressure-moulding-material.

Controindicazione: Non è possibile escludere reazioni allergiche ai componenti del foglio di ritenzione CA (PETG) su soggetti sensibili. Ciascun utilizzo al di fuori del campo di applicazione non è indicato.

Conservazione: Conservare a una temperatura compresa tra 5 °C e 35 °C. Proteggere dai raggi solari. Conservare in luogo asciutto.

Avvertenza: L'utilizzo è riservato solo a persona-le qualificato entro 15 minuti dall'apertura. Aprire solo buste a barriera non danneggiate e sigillate. Dispositivo monouso. Eventuali incidenti gravi associati all'utilizzo del dispositivo devono essere segnalati immediatamente al fabbricante e alle autorità competenti!

Indicazioni di sicurezza: L'uso è di esclusiva responsabilità dell'operatore. Non utilizzare gli splint in presenza di incrinature/rottture/bolle, per evitare pericoli di ingestione o aspirazione. Quando si utilizza il foglio di ritenzione CA in combinazione con modelli stampati in 3D, utilizzare una pellicola protettiva perforata (ISOFOLAN®). Rimuovere la pellicola protettiva dopo la termoformatura. Non portare i dispositivi a contatto con solventi alcolici/organici, acqua calda o getti di vapore.

SK Návod na použití

Určený účel: Termoplastické fólie na výrobu aparátů a dláh pre stomatologickú a ortodontickú liečbu

Indikácia: Vhodné výhradne na výrobu retainerov, retenčných dláh a dlhodobých retainerov. Pokyny na aplikáciu nájdete na www.scheu-dental.com/pressure-moulding-material.

Kontraindikácia: U senzibilizovaných osôb nemožno vylúčiť alergickú reakcie na zložky CA retenčnej fólie (PETG). Akákoľvek aplikácia mimo oblasti použitia je neindikovaná.

Skladovanie: Skladujte pri teplote 5 až 35 °C. Chráňte pred sivečným svetlom. Uchovávať v suchu.

Upozornenie: Na použitie len kvalifikovaným odborným personálom do 15 minút od otvorenia. Otvárajte len nepoškodené, uzavreté bariérové vrecká. Na jednorazové použitie. Závažné incidenty súvisiace s používaním výrobku sa musia okamžite nahlásiť výrobcovi a príslušnému orgánu!

Bezpečnostné upozornenie: Za použitie je zodpovedný zubný lekár. V prípade trhlín/praskín/ tvorby bublínok v materiáli sa dlaha nesmie používať, hrozi riziko prehltnutia alebo vdýchnutia. Pri použití CA retenčnej fólie s 3D vytlačeními modelmi sa musí použiť neperforovaná ochranná fólia (ISOFOLAN®). Po procese tepelného tvarovania ochrannú fóliu odstráňte. Výrobky sa nesmú dostať do kontaktu s alkoholovými/organickými rozpúšťadlami, horúcou vodou alebo parnými čističmi.

ES Instrucciones de uso

Finalidad prevista: Planchas de termomoldeo para la fabricación de aparatos y férulas para el tratamiento odontológico y de ortodoncia

Indicación: El producto es apto exclusivamente para la fabricación de retenedores, férulas de retención y retenedores de largo plazo. Las instrucciones de uso están disponibles en www.scheu-dental.com/pressure-moulding-material.

Contraindicaciones: No se descartan reacciones alérgicas a los componentes de la plancha de retención CA (PETG) en personas sensibilizadas. No está indicado ningún uso fuera del campo de aplicación.

Almacenamiento: Almacenar entre 5 °C y 35 °C. Proteger de la luz solar. Almacenar seco.

Aviso: El producto debe utilizarse únicamente por parte de personal especializado cualificado en un plazo de 15 minutos después de su apertura. Abra únicamente bolsas barrera cerradas que no presenten deterioros. Para un solo uso. Los incidentes graves ocurridos en relación con el uso del producto deben notificarse inmediatamente al fabricante y a las autoridades competentes.

Instrucciones de seguridad: El uso recae en la responsabilidad del odontólogo u ortodoncista encargado del tratamiento. La férula no debe utilizarse en caso de grietas/roturas/formación de burbujas en el material; riesgo de ingestión o aspiración. Al utilizar la plancha de retención CA con modelos impresos en 3D debe utilizarse una lámina de protección no perforada (ISOFOLAN®). Retire la lámina de protección después del proceso de termomoldeo. No ponga en contacto los productos con disolventes que contengan alcoholes/disolventes orgánicos, agua caliente o vapori-zadores.

TR Kullanım talimatı

Kullanım amacı: Diş ve ortodontik tedavi için aparat ve plak üretimi için baskınlı kalıplama folyoları

Endikasyon: Sadece tutucuların, tutucu tellerin ve uzun süreli tutucuların üretimi için uygundur. Kullanım bilgileri www.scheu-dental.com/pressure-moulding-material adresindedir.

Kontrendikasyon: Hassas kişilerde CA tutma folyosu (PETG) bileşenlerine karşı alerjik reaksiyonlar gelişebilir. Kullanım alanı dışında kullanım için endike değildir.

Saklama: 5 ila 35 °C'de saklayın. Güneş ışığından koruyun. Kuru ortamda muhafaza edin.

Uyarı: Açıldktan sonra, 15 dakika içerisinde kalifiye uzman personel tarafından kullanılmalıdır. Sadece hasarsız ve mühürlü bariyer torbalarını açın. Tek kullanımlıktır. Ürünün kullanımıyla ilgili meydana gelen ciddi olaylar derhal üreticiye ve ilgili kuruma bildirilmelidir!

Güvenlik bilgisi: Kullanım uygulayıcının sorumluluğundadır. Malzeme çatlamış/kırılmış/kabarmışsa, yutma veya aspirasyon riski varsa plak kullanılmamalıdır. CA tutma folyosunu 3D baskılı modellerle kullanırken, deliksiz bir koruyucu film (ISOFOLAN®) kullanılmalıdır. Baskınlı kalıplama işleminden sonra koruyucu folyoyu çıkarm. Ürünleri alkolli/organik çözeltili maddeleri, sıcak su ya da buharlı temizleyiciler ile temas ettirmeyin.

PT Instruções de utilização

Finalidade prevista: Películas de termoformagem para a criação de equipamentos e aparelhos dentários para o tratamento odontológico e ortodôntico

Indicação: Adequadas exclusivamente para a criação de retentores, aparelhos de retenção e retentores a longo prazo. Instruções de utilização em www.scheu-dental.com/pressure-moulding-material.

Contraindicação: Não é possível excluir a ocorrência de reações alérgicas a componentes da película de retenção CA (PETG) em pessoas sensibilizadas. Qualquer utilização fora da área de aplicação não é indicada.

Armazenamento: Armazenar entre 5 e 35 °C. Proteger da luz solar. Guardar seco.

Nota: Utilização apenas por pessoal técnico qualificado e dentro de 15 minutos após a abertura. Abra apenas sacos de barreira selados e sem danos. Para uma única utilização. Os incidentes graves ocorridos em associação com a utilização do produto devem ser imediatamente reportados ao fabricante e à autoridade competente!

Indicação de segurança: A utilização é da responsabilidade do responsável pelo tratamento. O aparelho dentário não pode ser utilizado se o material apresentar rasgos/fissuras/bolhas, perigo de engolimento ou aspiração. Em caso de utilização da película de retenção CA com modelos impressos em 3D, é necessário utilizar uma película protetora não perfurada (ISOFOLAN®). Remover a película protetora após a termoformagem. Não colocar os dispositivos em contacto com solventes com teor de álcool/orgânicos, água quente ou jatos de vapor.

SE Bruksanvisning

Användningsområde: Djupdragningsfilm för tillverkning av utrustning och skenor för tandvårdsbehandling och käkortopedisk behandling

Indikation: Lämpar sig endast för tillverkning av retainers, retentionsskenor och fasta retainers. Bruksanvisningar finns på www.scheu-dental.com/pressure-moulding-material.

Kontraindikation: Allergiska reaktioner mot komponenter i CA-retentionsfolien (PETG) kan inte uteslutas hos sensibliserade personer. Andra användningar utanför användningsområdet är inte indicerade.

Lagring: Lagras vid 5–35 °C. Skyddas mot sol-ljus. Förvaras tørt.

Observera: Får endast användas av kvalificerad personal inom 15 minuter efter att förpackningen har öppnats. Öppna endast intakta, förslutna barriärpåsar. För engångsbruk. Allvarliga tillbud i samband med användning av produkten ska omedelbart rapporteras till tillverkaren och till behörig myndighet!

Säkerhetsinformation: Den behandlande personen ansvarar för användningen. Skenan får inte användas om det finns sprickor/brott/bubblor i materialet, risk för svällning eller aspiration. Vid användning av CA-retentionsfolie med 3D-utskrivna modeller ska en operererad skyddsfilm (ISOFOLAN®) användas. Ta bort skyddsfilmen efter djupdragnin. Produkterna får inte komma i kontakt med alkoholhaltiga/organiska lösningsmedel, varmt vatten eller ångtvätt.

LT Naudojimo instrukcija

Numatytą paskirtis: giliojo tempimo plėvelės, skurmatys įtvartus ir ortodontinio gydymo prietaisams ir įtvarams gaminti

Indikacija: išskirtinai skirta gaminti įtvartus, retencinius įtvartus ir ilgalaikius įtvartus. Naudojimo nurodymai pateikiami www.scheu-dental.com/pressure-moulding-material.

Kontraindikacija: neatmetamos alerginės reakcijos dėl CA retencinės plėvelės (PETG) komponentų jautriems žmonėms. Draudžiamas bet koks naudojimas ne pagal paskirtį.

Saugojimas: Laikyti 5–35 °C temperatūroje. Saugokite nuo saulės spindulių. Saugokite sausoje vietoje.

Pastaba: leidžiama naudoti tik kvalifikuotam personalui ir per 15 minučių nuo atidarymo. Atidarykite tik nepažeistus, uždarytus barjerinius maišelius. Vienkartinio naudojimo. Apie rimtus incidentus, susijusius su gaminio naudojimu, būtina nedelsiant informuoti gamintoją ir atsakingą instituciją!

Saugos nurodymas: už naudojimą atsako gydytojas. Įtvaro negalima naudoti, jei medžiagoje yra įtrūkimų / lūžių/ /pūsulių, nes kyla užspringimo ar aspiracijos pavojus. Naudojant CA retencinę plėvelę su 3D spausdintais modeliais reikia naudoti neperforuotą apsauginę plėvelę (ISOFOLAN®). Po giliojo tempimo proceso nuimkite apsauginę plėvelę. Gaminiai negali liestis su alkoholiniais / organiniais tirpikliais, karštu vandeniu ar garintuvais.

DK Brugsanvisning

Erklæret formål: Dybtræksfolier til fremstilling af apparatur og skinner til dental og kæbeortopædisk behandling

Indikation: Udelukkende egnet til fremstilling af retainerne, retentionskinner og langtidstreainere. Anvendelsesanvisninger på www.scheu-dental.com/pressure-moulding-material.

Kontraindikation: Allergiske reaktioner over for bestanddele i rententionsfolie (PETG) kan ikke udelukkes ved overfølsomme personer. Enhver anvendelse uden for anvendelsesområdet er ikke indiceret.

Opbevaring: Opbevares mellem 5 og 35°C. Beskyttes mod sollys. Opbevares tørt.

Henviisning: Må kun anvendes af faguddannet personale i løbet af 15 minutter efter åbning. Åbn kun ubeskadigede, lukkede barriereposer. Til engangsbrug. Alvorlige hændelser i forbindelse med anvendelsen af produktet/udstyret skal øjeblikkeligt rapporteres til fabrikanten og de kompetente myndigheder!

Sikkerhedshenviisning: Anvendelsen er behandlerens ansvar. Skinnen må ikke anvendes i tilfælde af ridser/brud/bleredannelse i materialet, fare for slugning eller aspiration. Ved anvendelse af CA-retentionsfolie med 3D-printede modeller skal der anvendes en ikke perforeret beskyttelsesfilm (ISOFOLAN®). Fjern beskyttelsesfilmen efter dybtrækprocessen. Produkter/udstyr må ikke komme i kontakt med alkoholholdige/organiske opløsningsmidler, varmt vand eller dampstråler.